




APARATURA
MEDYCZNA

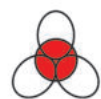

KENDROMED®

KATALOG 2025

PN-EN ISO 9001:2015
ISO 13485:2016
MDD 93/42/ECC

SPIS TREŚCI

PANELE NADŁOŻKOWE	4
PANELE PIONOWE	8
ARANŻACJE PANELI	9
MOSTY	10
REALIZACJA	11
KOLUMNY	15
REALIZACJA	24
LAMPY OPERACYJNE	25
APARATY DO ZNIECZULENIA	28
RESPIRATORY	41
URZĄDZENIA DO RESUSCYTACJI	42
VIDEOLARYNGOSKOP	43
PODSTAWY JEZDNE	44
WÓZKI MEDYCZNE	45
UCHWYTY ŚCIENNE	46
UCHWYTY GAZOWE	47
AKCESORIA	47

O NAS

Innowacyjne rozwiązania dla nowoczesnej medycyny

Od dekad dostarczamy niezawodną aparaturę medyczną, która wspiera codzienną pracę lekarzy, pielęgniarek i ratowników w szpitalach, klinikach oraz placówkach medycznych w Polsce i na świecie. Jesteśmy ekspertami w projektowaniu, produkcji, instalacji i serwisie sprzętu, który staje się fundamentem bezpiecznej i komfortowej opieki nad pacjentem.

Nasza oferta obejmuje kompleksowe wyposażenie bloków operacyjnych, oddziałów kardiologicznych, neonatologicznych, ratownictwa medycznego oraz intensywnego nadzoru anestezjologicznego. Dzięki współpracy z personelem medycznym oraz wieloletniemu doświadczeniu, dostarczamy rozwiązania spełniające najwyższe standardy jakości i ergonomii, które znacząco wpływają na komfort i efektywność pracy.

Tradycja i nowoczesność – historia KENDROMED

Korzenie naszej firmy sięgają 1967 roku, kiedy to Janusz Jędrzejewski – nasz założyciel i wieloletni prezes – z pasją tworzył innowacyjne rozwiązania dla medycyny. To on wyznaczył kierunek, którym podążamy do dziś, stawiając na najwyższą jakość, niezawodność i precyzję wykonania. Z biegiem lat KENDROMED stał się liderem w branży, wdrażając pionierskie technologie i dostarczając sprzęt do setek placówek medycznych. Byliśmy pierwszym polskim przedsiębiorstwem, które wprowadziło innowacyjne kolumny medyczne i panele zasilające, a dziś nasze rozwiązania można znaleźć w tysiącach szpitali i klinik na całym świecie.

Dzięki zaangażowaniu naszego zespołu inżynierów, naukowców i specjalistów z różnych dziedzin, stale rozwijamy i udoskonalamy nasze produkty. Naszym celem jest budowanie medycyny przyszłości – bezpiecznej, efektywnej i dostosowanej do dynamicznych potrzeb personelu medycznego oraz pacjentów.

Nasze osiągnięcia w liczbach

- **3500+** zainstalowanych kolumn medycznych na całym świecie
- **6500+** wdrożonych paneli zasilających
- **10 000+** urządzeń dostarczonych do placówek medycznych
- **Obecność w większości polskich szpitali**

Każda z tych instalacji to efekt naszej pasji i nieustannego dążenia do doskonałości. Współpracujemy z największymi placówkami medycznymi w Polsce i za granicą, oferując kompleksowe rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb naszych klientów.

Nasza oferta

Wyposażenie bloków operacyjnych i oddziałów szpitalnych

Zapewniamy nowoczesne rozwiązania dostosowane do potrzeb personelu i pacjentów. Nasze produkty gwarantują ergonomię pracy i pełne bezpieczeństwo.

Zasilanie i gazy medyczne

Projektujemy i instalujemy systemy zasilania oraz dystrybucji gazów medycznych, zapewniając ich niezawodne działanie w kluczowych momentach.

Serwis i konserwacja aparatury medycznej

Oferujemy diagnostykę, konserwację oraz naprawę sprzętu medycznego. Nasz doświadczony zespół techników i inżynierów dba o to, by wszystkie urządzenia działały bez zarzutu.

Zaufaj doświadczeniu i profesjonalizmowi

Jesteśmy dumni z naszej historii, ale patrzymy w przyszłość, nieustannie rozwijając nasze technologie i dostosowując ofertę do rosnących potrzeb placówek medycznych. Naszym priorytetem jest dostarczanie niezawodnych rozwiązań, które poprawiają jakość i bezpieczeństwo pracy personelu medycznego oraz komfort pacjentów.

KENDROLINE

Panele Kendroline posiadają wszystko, co jest najważniejsze dla pacjenta. Urządzenia wyposażone są w gniazda elektryczne, przyłącza gazów medycznych i oświetlenie LED. Dodatkowo istnieje możliwość montażu szyn, które są zintegrowane z profilem i pozwalają przygotować panel do montażu systemu alarmowego.



Nasze panele są nie tylko praktyczne, trwałe i higieniczne, ale także spełniają najwyższe standardy estetyczne, a użytkownik może wybierać spośród wielu kształtów i kolorów. Przygotowaliśmy specjalną ofertę do pokoi dziecięcych, a dla wymagających klientów, niepowtarzalne, indywidualne aranżacje.

Panele z serii SLIM

Panele serii SLIM mają grubość zaledwie 55 mm, dzięki czemu nie zajmują dużo miejsca i idealnie nadają się do małych pomieszczeń.

Oferujemy trzy podstawowe konfiguracje.



Panel SL30

Podstawowe wyposażenie
(długość: 1600 mm)



- Oświetlenie ogólne, do czytania i nocne LED
- Gniazda elektryczne 230V - 3 szt.
- Gniazdo ekwipotencjalne - 2 szt.
- Podwójne gniazdo telekomunikacyjne - RJ45
- Wyłącznik oświetlenia manipulatora
- Przygotowanie pod NCS (tylko otwór)
- Gazy medyczne: Tlen - O₂, próżnia - VAC



Panel SL50

Podstawowe wyposażenie
(długość: 1600 mm)



- Oświetlenie ogólne, do czytania i nocne LED
- Gniazda elektryczne 230V - 4-6 szt.
- Gniazdo ekwipotencjalne - 2 szt.
- Podwójne gniazdo telekomunikacyjne - RJ45
- Wyłącznik oświetlenia manipulatora
- Przygotowanie pod NCS (tylko otwór)
- Gazy medyczne: Tlen - O₂, próżnia - VAC, AIR



Panel SL70


Podstawowe wyposażenie
(długość: 1600 mm)



- Oświetlenie ogólne, do czytania i nocne LED
- Gniazda elektryczne 230V - 6 szt.
- Gniazdo ekwipotencjalne - 2 szt.
- Podwójne gniazdo telekomunikacyjne - RJ45
- Wyłącznik oświetlenia manipulatora
- Przygotowanie pod NCS (tylko otwór)
- Gazy medyczne: Tlen - O₂, próżnia - VAC, AIR

Panele KL


Panele serii KL400 są dostępne w grubościach: 85 mm. Standardowo wyposażone są w dwa opływowe moduły oświetleniowe, a klasyczny design paneli pasuje do niemal każdego pomieszczenia szpitalnego.

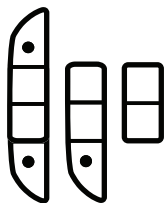

Panele KL400


Podstawowe wyposażenie

- Oświetlenie ogólne, do czytania i nocne LED
- Gniazdo elektryczne 230 V - 4 szt.
- Gniazda ekwipotencjalne - 4 szt.
- Podwójne gniazdo telekomunikacyjne - RJ45
- Wyłącznik lub manipulator oświetlenia
- Przygotowanie pod NCS (tylko otwór)
- Gazy medyczne: tlen - O₂, próżnia - VAC
0,5MPa - AIR

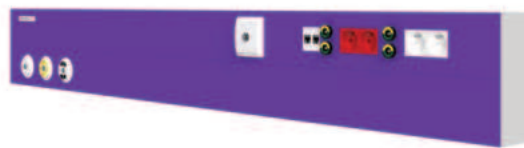

Uwaga: w modelach KL można zainstalować jedną lub dwie szyny

Nie zaleca się instalowania szyn w obszarze punktów gazowych, głównie tlenowych, ponieważ utrudnia to korzystanie z dozowników z nawilżaniem.

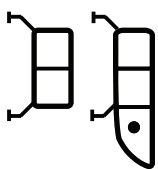


Panele KL400

Podstawowe wyposażenie

- Oświetlenie ogólne, do czytania i nocne LED
- Gniazdo elektryczne 230 V - 12 szt.
- Gniazda ekwipotencjalne - 8 szt.
- Podwójne gniazdo telekomunikacyjne - RJ45
- Wyłącznik oświetlenia
- Przygotowanie pod NCS (tylko otwór)
- Gazy medyczne: tlen - O₂, próżnia - VAC
0,5MPa - AIR
- Zintegrowana górna i dolna szyna medyczna
- Montaż akcesoriów (półki, kosze, wieszaki)



Panele na oddziały intensywnej terapii

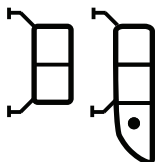

Panele IC1000

Podstawowe wyposażenie
(stanowisko 2000 mm)

- Oświetlenie miejscowe i nocne LED
- Gniazdo elektryczne 230 V - 8 szt. (minimum)
- Gniazdo wyrównania potencjałów - 4 szt.
- Podwójne gniazdo telekomunikacyjne - RJ45
- Wyłącznik oświetlenia
- Przygotowanie pod NCS (tylko otwór)
- Gazy medyczne: 2 x tlen - O₂, 2 x próżnia - VAC 0,5MPa - AIR
- Zintegrowana górna i dolna szyna medyczna
- Montaż akcesoriów (półki, kosze, wieszaki)

Ilość mediów może być zwiększona w zależności od lokalnych potrzeb.



Dwukanałowy panel IC1000 z wyposażeniem na OIT



Dwukanałowy panel IC1000 z wyposażeniem na OIT
oraz oświetleniem miejscowym i nocnym

Panele pionowe serii IC



Panel pionowy IC 1000
Przykład 1



Panel pionowy IC 1000
Przykład 2



Panel pionowy IC 1000
Przykład 3

Funkcjonalne i stylowe

Nasze produkty podnoszą estetykę pomieszczeń, nie tylko porządkując i centralizując akcesoria, ale również stanowiąc element dekoracyjny. Odpowiednie dopasowanie kolorów i wzorów sprawia, że wnętrza stają się stylowe i nowoczesne.

Oferujemy naszym klientom szeroką gamę kolorów paneli i mostków. Oprócz podstawowych wzorów proponujemy również panele Kids, przeznaczone do pokoi dziecięcych. Seria Kids ożywia sale szpitalne, nadając im charakter pokoju dziecięcego, co sprawia, że hospitalizacja staje się przyjemniejsza dla najmłodszych.


Na specjalne życzenie klienta jesteśmy w stanie wykonać panele z dowolną grafiką.





Sala szpitalna z panelami dopasowanymi kolorystycznie
Kolory: NaturalALU i RAL 900

Rekomendowane kolory paneli serii KENDROLINE





Anodized aluminium

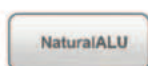

RAL powder painting

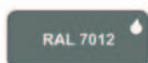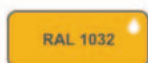

decoRAL Texturing

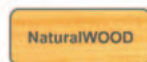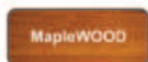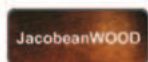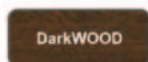

Specjalne aranżacje paneli



Panel „NATURE” wykonany na specjalne zamówienie dla szpitala w Dubaju

KENDROLINE

Mosty wykonywane są standardowo ze specjalnych wytrzymałych profili aluminiowych. W zależności od długości i docelowego obciążenia mosty mogą być mocowane na jednym, dwóch lub kilku słupach nośnych.

Nasze rozwiązania techniczne w połączeniu z bogatym wyposażeniem dodatkowym pozwalają na dużą elastyczność w realizacji nawet najbardziej skomplikowanych urządzeń. Oprócz podstawowego wyposażenia stanowiska w gazy medyczne, zasilanie elektryczne oraz teletechnikę, możemy zaproponować zestawy półkowe wyposażone w niezbędne akcesoria z możliwością wygodnego lokowania pod belką zasilającą na całej długości stanowiska lub wzdłuż linii kilku stanowisk.

Most może zostać wyposażony w oświetlenie górne i dolne (miejscowe, obsługowe, nocne) oraz w inne dodatkowe niezbędne wyposażenie w tym półki, szuflady, wieszaki czy pojemniki na materiały medyczne. Standardowo mosty są mocowane do sufitu, jednak w wykonaniach specjalnych zawiesia mogą być przymocowane do podłogi lub w układzie rozporowym.





Panel nadłóżkowy
KL400



Panel nadłóżkowy
KL400



Panel nadłóżkowy KL400



Panel nadłożkowy SL50



Panel nadłożkowy SL50



Panel nadłożkowy SL50



Panel pionowy IC1000



Panele pionowe IC1000

Mosty



KENDROPORT®

Kolumnowy System Zasilania

Modułowa konstrukcja kolumn KENDROPORT sprawia, że urządzenia mogą być dostosowane do każdego rodzaju sal – operacyjnych, zabiegowych, resuscytacyjnych i terapii natychmiastowej. Urządzenia te dzięki szerokiej gamie wyciągników, konstrukcji głowic zasilających i osprzętu spełnią każde nawet najbardziej specyficzne wymagania. Wieloletnie doświadczenie naszej firmy w projektowaniu i produkcji kolumn gwarantuje wysoką jakość i niezawodność urządzeń. Szeroka gama ramion nośnych, głowic zasilających i dodatkowego osprzętu pozwala na skonfigurowanie kolumny idealnej dla każdego praktycznie stanowiska. Różnorodna konfiguracja kolumn zapewnia ergonomiczne rozmieszczenie aparatury medycznej i komfortowe warunki pracy personelu. Dostępne elementy wyposażenia, łatwość ich montażu oraz możliwość swobodnego aranżowania stanowiska pozwalają na optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni.



Kolumny anestezyjologiczne

Podnoszenie aparatu do znieczulania jest zdecydowanym ułatwieniem pracy anestezjologa. Eliminuje to wystąpienie szeregu incydentów zakłócających pracę aparatu do znieczulania. Aparat zostaje na sztywno połączony z głowicą w której znajdują się wszystkie przyłącza gazowe i elektryczne. Dodatkowo powierzchnia podłogi pozostaje wolna od kabli oraz węży zasilających. Kolumny anestezyjologiczne pozwalają na wygodne kształtowanie stanowiska pracy anestezjologa. Zapewniają swobodny dostęp do przyłączy elektrycznych, teletechnicznych i gazowych. Prezentowane urządzenia są propozycjami i posiadają możliwość rozbudowy o elementy dodatkowe. Każdą kolumnę konfigurujemy według wytycznych i potrzeb użytkownika, tak aby dostarczony sprzęt spełnił wszystkie oczekiwania.



Kolumna typu ALFA



Kolumna prosta ALFA 0

Proponowane wyposażenie podstawowe

półka z szynami 25x10	1 szt.
szuflada uszczelniona	1 szt.
wieszak przegubowy pomp i kroplówek	1 kpl.
gniazda elektryczne 230V	6 szt.
gniazda wyrównania potencjału	6 szt.
przygotowanie pod instalację teletechniczną	2 szt.

Punkty poboru gazów medycznych:

O ₂ - tlen	2 szt.
AIR - sprężone powietrze 0,5	2 szt.
VAC - próżnia	2 szt.
N ₂ O - podtlenek azotu	1 szt.
AGSS - inżektorowy odciąg gazów	1 szt.
moduł kontrolny gazów (opcja)	

Kolumny anestezyjologiczne

Kolumny z systemami podnoszenia umożliwiają zawieszenie aparatów do znieczulania pochodzących od wielu producentów. Jesteśmy w stanie wykonać uchwyt (adapter) do każdego aparatu do znieczulania jeżeli jest on fabrycznie przystosowany do podnoszenia. Podwójny system hamulców: ciernych, i pneumatycznych lub elektromagnetycznych każdego przegubu gwarantuje stabilną pozycję urządzenia i umieszczonej na nim aparatury, jednocześnie zapewniając personelowi łatwe i nie wymagające wysiłku przemieszczanie dzięki ergonomicznym uchwytom ze zintegrowanymi przyciskami do zwalniania hamulców. Długość pojedynczego ramienia może wynosić od 600 mm do 1600 mm, podwójnego - od 1200 do 2600 mm. Kolumna może być opcjonalnie wyposażona w system monitorujący pracę instalacji gazów medycznych.



**Kolumna typu ALFA C
z windą do aparatu**



Kolumna typu BETA

Proponowane wyposażenie podstawowe

hamulce przegubów wysięgnika i konsoli	1 szt.
półka z szynami 25x10	1 szt.
szuflada uszczelniona	1 szt.
wieszak przegubowy pomp i kroplówek	1 kpl.
gniazda elektryczne 230V	8 szt.
gniazda wyrównania potencjału	8 szt.
przygotowanie pod instalację teletechniczną	2 szt.

Punkty poboru gazów medycznych:

O2 - tlen	2 szt.
AIR - sprężone powietrze 0,5	2 szt.
VAC - próżnia	2 szt.
N2O - podtlenek azotu	1 szt.
AGSS - inżektorowy odciąg gazów	1 szt.
moduł kontrolny gazów (opcja)	

Kolumny chirurgiczne

Kolumny chirurgiczne dzięki dostępnemu wyposażeniu zarówno standardowemu, jak i niestandardowemu są w stanie sprostać gustom nawet najbardziej wymagających użytkowników. Szeroki wachlarz elementów wyposażenia, łatwość ich montażu oraz możliwość swobodnej reorganizacji ich usytuowania sprawiają, iż użytkownik posiada niezliczone możliwości kształtowania stanowiska, co jest niezwykle istotne dla zastosowań w salach o różnym profilu operacji.

Proponowane wyposażenie podstawowe

hamulce przegubów wysięgnika i konsoli

półka z szynami bocznymi	1 szt.
szuflada uszczelniona	1 szt.
gniazda elektryczne 230V	8 szt.
gniazda wyrównania potencjału	8 szt.
przygotowanie pod instalację teletechniczną	2 szt.

Punkty poboru gazów medycznych:

AIR - sprężone powietrze 0,5	2 szt.
VAC - próżnia	2 szt.
AIR - motor	1 szt.



K60S-BETA100



K60S-BETA 80/100



K60P-ALFA80/100


Kolumny laparoskopowe

Kolumny laparoskopowe umożliwiają swobodne rozmieszczenie niezbędnej aparatury na półkach. Duża ilość gniazd elektrycznych pozwala na wygodne podłączenie wszystkich urządzeń.

Dodatkowo stanowisko można wyposażyć w monitory. Gama różnych uchwytów na monitor pozwala na kompozycję stanowiska najbardziej odpowiadającego specyfice sali operacyjnej. Ciekawą propozycją jest instalacja w konsoli zasilającej panel sterujący lampą operacyjną z wbudowaną kamerą HD lub 4K.



K100S-ALFA60/80
z przegubowym uchwytem
na monitor pogładowy

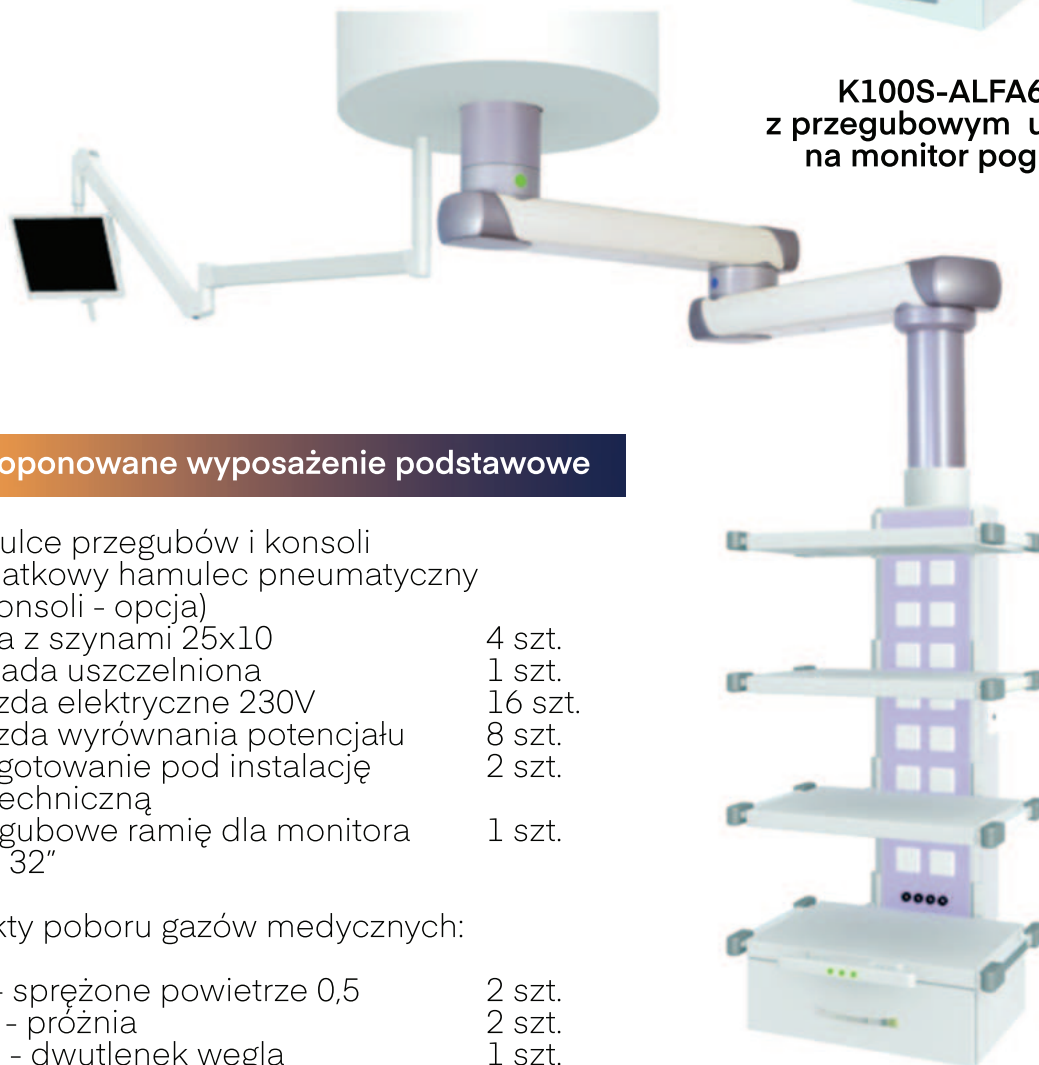

K100S-ALFA80/80
z ramieniem sufitowym typu Valia S

Proponowane wyposażenie podstawowe

hamulce przegubów i konsoli (dodatkowy hamulec pneumatyczny na konsoli - opcja)	
półka z szynami 25x10	4 szt.
szuflada uszczelniona	1 szt.
gniazda elektryczne 230V	16 szt.
gniazda wyrównania potencjału	8 szt.
przygotowanie pod instalację teletechniczną	2 szt.
przegubowe ramię dla monitora Max. 32"	1 szt.

Punkty poboru gazów medycznych:

AIR - sprężone powietrze 0,5	2 szt.
VAC - próżnia	2 szt.
CO2 - dwutlenek węgla	1 szt.
Opcjonalnie uchwyt na butlę CO2 lub AR	1 szt.

Kolumny do OIT

Praktyczne wyposażenie
Oddziałów Intensywnej Terapii

Proponowane wyposażenie podstawowe

hamulce przegubów wysięgników
i konsol

półka z szynami 25x10

3 szt.

szuflada uszczelniona

1 szt.

wieszak przegubowy pomp
i kroplówek

2 kpl.

pojemnik na rękawiczki

1 szt.

kosz na cewniki

1 szt.

pozioma szyna sprzętowa

2 szt.

gniazda elektryczne 230V

16 szt.

gniazda wyrównania potencjału

8 szt.

przygotowanie pod instalację
teletechniczną

2 szt.

Gniazda gazowe:

O₂ - tlen

2 szt.

AIR - sprężone powietrze 0,5

2 szt.

VAC - próżnia

2 szt.

N₂O - podtlenek azotu

1 szt.



K100S-ALFA60/80

Kolumny do OIT

Praktyczne wyposażenie
Oddziałów Intensywnej Terapii



K60S-ALFA60/80 K100S-ALFA60/80

Proponowane wyposażenie podstawowe

	hamulce przegubów	
	lampa zabiegowa LED na długim ramieniu	
	półka z szynami 25x10	3 szt.
	szuflada uszczelniona	1 szt.
2 kpl.	wieszak przegubowy pomp i kroplówek	
1 szt.	uchwyt pojemnika na rękawiczki	
1 szt.	kosz na cewniki	
2 szt.	pozioma szyna sprzętowa 600mm	
8 szt.	gniazda elektryczne 230V	16 szt.
8 szt.	gniazda wyrównania potencjału	8 szt.
2 szt.	przygotowanie pod instalację teletechniczną	2 szt.

Punkty poboru gazów medycznych:

O2 - tlen	2 szt.
AIR - sprężone powietrze 0,5	2 szt.
VAC - próżnia	2 szt.
N2O - podtlenek azotu	1 szt.

Kolumny do OIT

Praktyczne wyposażenie
Oddziałów Intensywnej Terapii



K100H-ALFA0

Proponowane wyposażenie podstawowe

hamulec cierny głowicy (opcja)	
półka z szynami 25x10	4 szt.
szuflada	2 szt.
wieszak przegubowy pomp i kroplówek	2 kpl.
pozioma szyna sprzętowa	2 szt.
gniazda elektryczne 230V	12 szt.
gniazda wyrównania potencjału	12 szt.
gniazda teletechniczne RJ45	4 szt.

Punkty poboru gazów medycznych:

O2 - tlen	2 szt.
AIR - sprężone powietrze 0,5	2 szt.
VAC - próżnia	2 szt.

Proponowane wyposażenie podstawowe

hamulec przegubów	
półka z szynami 25x10	3 szt.
szuflada	1 szt.
wieszak przegubowy pomp i kroplówek	2 kpl.
gniazda elektryczne 230V	16 szt.
gniazda wyrównania potencjału	8 szt.

Punkty poboru gazów medycznych:

O2 - tlen	2 szt.
AIR - sprężone powietrze 0,5	2 szt.
VAC - próżnia	2 szt.

Opcjonalnie:

- oświetlenie Ambiente na ramieniu lub w głowicy
- moduł kontrolny pracy gazów medycznych
- schowki na nadmiar kabli lub przewodów



K100S-ALFA100

Konsole - głowice

Konsole sprzętowe służą do zasilania aparatury medycznej w energię elektryczną, gazy medyczne oraz doprowadzenia sieci teletechnicznej. Drugą ważną cechą konsol jest możliwość ergonomicznego zawieszenia sprzętu medycznego. Do tego celu służą elementy systemu KENDROPORT, takie jak: półki, szuflady oraz inne akcesoria.

Dostępne są różne typy konsol ze względu na ich kształt i przeznaczenie:

- wąskie (typ slim), które są oznaczone literą „S”;
- szerokie, których fronty mają zwiększoną powierzchnię,
- sześciokątne (typ hex), które pozwalają na rozmieszczenie osprzętu na większej powierzchni przy jednoczesnej minimalizacji miejsca, które zajmują, oznaczane są literą „H”.

Aby właściwie dobrać korpus do specyfiki sali i danego stanowiska niezwykle ważne jest dopasowanie długości, w oparciu o ilość wymaganych mediów zasilających.

Kolumny KENDROPORT posiadają konsole zasilające o zróżnicowanym kształcie, kilku szerokościach, a także o najczęściej spotykanych wysokościach.

Przykładowy widok wyposażenia strony gazowej



Korpus standardowy „S”



Korpus szeroki



Korpus poziomy „P”



Korpus sześciokątny „H”

Przykładowy widok wyposażenia strony elektrycznej



Korpus standardowy „S”



Korpus szeroki



Korpus poziomy „P”



Korpus sześciokątny „H”

Przykłady możliwej konfiguracji konsol - przekrój poprzeczny od góry



Kolumny KENDROPORT



SIMEON BusinessLine

Doskonałe światło, doskonała jakość




PUSHING TECHNOLOGY TO EXCELLENCE

Lampy operacyjne powinny być efektywne, wytrzymałe, mobilne i odpowiadać najnowszym standardom technologicznym. Dokładnie takie są lampy firmy SIMEON.

Seria BusinessLine wykorzystuje wiodącą na rynku technologię reflektorów udoskonaloną przez zastosowanie opatentowanego systemu Sim.POD. SIMEON BusinessLine przynosi technologiczną doskonałość salom operacyjnym na całym świecie. Oferta obejmuje nieograniczone kombinacje małych lamp Sim.LED 450, średniej wielkości lamp Sim.LED 500 i lamp Sim.LED 700 ze stałą i regulowaną temperaturą barwową oraz torem wizyjnym. Seria SIMEON BusinessLine oferuje doskonałe oświetlenie dla użytkownika w każdej sytuacji.

Lampy operacyjne BusinessLine zawierają w sobie wszystkie zalety systemu Sim.LED przy najkorzystniejszym stosunku wydajności do kosztów.

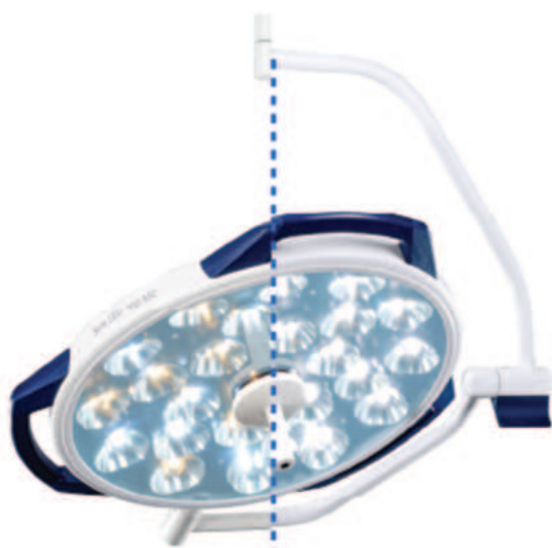

Lampa Sim.LED 700 MC
z regulowaną
temperaturą
barwową

Lampa Sim.LED 700 SC ze stałą
temperaturą
barwową

TEMPERATURA BARWOWA

Lampy firmy Simeon dostępne są w wersji ze stałą temperaturą barwową 4500 K - wersja SC oraz ze zmienną temperaturą barwową regulowaną w zakresie 3500 - 5000 K z możliwością zmiany co 500 K - wersja MC.

SIMEON BusinessLine

Doskonałe światło, doskonała jakość

Parametry techniczne*	700 MC/SC	Sim.LED 500 MC/SC	450 MC/SC
Zasada oświetlenia	24 reflektory po 3 punkty LED	18 reflektorów po 3 punkty LED	12 reflektorów po 3 punkty LED
Natężenie oświetlenia w odległości 1 metra	160 klx	140 klx	120 klx
Elektroniczna regulacja jasności	48 - 160 klx	42 - 140 klx	36 - 120 klx
Średnica pola operacyjnego d10 w odległości 1 metra	180 - 300 mm	180 - 290 mm	160 - 230 mm (MC) 160 - 250 mm (SC)
Współczynnik odwzorowania barw Ra	96	96	96
Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9	94/96	94/96	94/96
Współczynnik odwzorowania koloru skóry R13	98	98	98
Temperatura barwowa źródła światła	3500-5500 K / 4500 K	3500-5500 K / 4500 K	3500-5500 K / 4500 K
Wgłębność oświetlenia bez dodatkowego fokuszowania (L1+L2) przy 20%	915 / 875 mm	945 / 930 mm	925 / 975 mm
Wgłębność oświetlenia bez dodatkowego fokuszowania (L1+L2) przy 60%	450 / 420 mm	495 / 460 mm	510 / 470 mm
Zakres pola roboczego	670 - 1545 mm	670 - 1600 mm	520 - 1495 mm
Napięcie zasilania	24 V	24 V	24 V
Pobierana moc	66 / 62 W	62 / 53 W	51 / 45 W
Przyrost temperatury na wysokości głowy	< 1 st. C	< 1 st. C	< 1 st. C
Żywotność modułów LED	> 60 000 h	> 60 000 h	> 60 000 h
Zasilanie podstawowe	~230 V / 24 V	~230 V / 24 V	~230 V / 24 V
Stopień ochrony obudowy czaszy lampy IP	IP52	IP52	IP52
System przełączania na zasilanie 24 V	Zintegrowany z zasilaczem	Zintegrowany z zasilaczem	Zintegrowany z zasilaczem
*Tolerancja parametrów wynosi 10%			

Lampa zabiegowa

typ Sim.LED 3000



- Intuicyjna obsługa dzięki intuicyjnej klawiaturze membranowej. Włączanie/wyłączanie i ciągła regulacja natężenia oświetlenia. W zależności od wariantu: regulacja pola lub regulacja temperatury barwowej
- Ergonomiczna konstrukcja głowicy lampy ułatwiająca pozycjonowanie. Łatwe ustawienie dla osób prawo i leworęcznych
- Sim.LED 3000 można łatwo dostosować do każdego rodzaju zastosowania i dowolnej lokalizacji jako wersję sufitową, ścienną lub mobilną. Ekonomiczna wydajność.
- Bardzo długa żywotność diod LED wynosząca 50 000 godzin.

		Sim.LED 3000 F	Sim.LED 3000 MC
Natężenie oświetlenia centralnego w odległości 1 m	K	60000	60000
Możliwość ściemniania		Tak, ciągłe	Tak, ciągłe
Średnica pola świetlnego d10 w odległości 1 m	mm	180 / 230 / 250	180, stała
Temperatura barwowa	K	4700	3700 / 4300 / 4700
Wskaźnik oddawania barw	Ra	95	95
Trwałość diod LED	h	50000	50000

Penlon



Aparat do znieczulenia ogólnego

Penlon Prima 465

- 12.1" ekran dotykowy z ulepszonym interfejsem użytkownika
- 8 trybów wentylacji
- Elektroniczny mieszalnik gazów z elektronicznym urządzeniem antyhipoksycznym i cyfrowymi przepływomierzami
- Odpowiedni dla dorosłych, dzieci i noworodków
- Wiele opcji monitorowania gazów anestetycznych



Aparat do znieczulenia ogólnego

Penlon Prima 465



- | | |
|---|---|
| <p>1 12.1" dotykowy wyświetlacz TFT z intuicyjnym interfejsem, elektronicznym mieszalnikiem gazu i cyfrowymi przepływomierzami</p> <p>2 8 trybów wentylacji</p> <p>3 Wszechstronna górna półka z bezpiecznym systemem mocowania GCX™ do monitorów pacjenta</p> <p>4 Opcje gniazdka elektrycznego</p> <p>5 Miejsce na dwa parowniki (Selectatec)</p> <p>6 Możliwość montażu do trzech butli</p> <p>7 Podświetlane miejsce do pracy z wysuwaną powierzchnią do pisania</p> | <p>8 Aluminiowe kolumny kompatybilne z GCX™ do montażu dodatkowych akcesoriów</p> <p>9 Szuflady o dużej pojemności</p> <p>10 Zintegrowany pochłaniacz CO2 i mieszek z interfejsem wentylatora</p> <p>11 Podświetlany pomocniczy wspólny wylot gazu (ACGO)</p> <p>12 Przepływomierz do terapii tlenowej</p> |
|---|---|

Penlon Prima 465 to najnowsze urządzenie do znieczulenia najwyższej klasy firmy Penlon, zapewniające idealne rozwiązania dla dzisiejszej ruchliwej sali operacyjnej.

Wybory i korzyści ukierunkowane na lekarza, w tym intuicyjny ekran dotykowy TFT o przekątnej 12,1" z elektronicznym mieszalnikiem gazów, cyfrowe przepływomierze i opcjonalne monitorowanie gazów anestetycznych.



Sterowanie respiratorem

Wyświetlacz dotykowy o przekątnej 12,1" z elektronicznym mikserem gazów z możliwością wyboru kombinacji gazów, Stężenie O₂ i kontrola natężenia przepływu świeżego gazu.



Większe bezpieczeństwo pacjenta

Dokładne elektroniczne urządzenie przeciw hipoksji i zapasowy system dostarczania O₂.



Przebiegi i wykresy oddechowe

Możliwy wybór maksymalnie 10 wykresów oddechowych na wyświetlaczu.



Dwukierunkowe czujniki przepływu

Mierzona objętość wdechowa i wydechowa wyświetlane na ekranie.



Profile pacjentów

Odpowiedni dla pacjentów dorosłych, pediatrycznych i noworodkowych.



Monitorowanie gazów

Opcja monitorowania gazów anestetycznych z automatyczną identyfikacją środka znieczulającego EtO₂ i Masimo® SpO₂.



Alarmy

Alarmy dźwiękowe i wizualne z kodowaniem kolorami dla podkreślenia ważności.



Zasilanie sieciowe

Szeroki wybór gniazdek elektrycznych przeznaczonych dla danego regionu oraz gniazdo skierowane przodem do kierunku jazdy.



Zasilanie akumulatorowe

Zapewnienie akumulatorowego zasilania urządzenie do 1,5h w przypadku awarii zasilania sieciowego.



Opcje zasilania gazami

Miejsce dla trzech butli oraz trzech centralnych połączeń rurociągów dla O₂, N₂O i powietrza medycznego.



Dodatkowe wyjście gazów ACGO

Podświetlany przełącznik i przedni wylot zapewniają wizualne wskazanie otwartego obwodu oddechowego.



Aktywny układ odciągu

Ewakuuje gazy poanestetyczne ochraniając personel przed ich szkodliwym wpływem.



Konserwacja i wsparcie posprzedażowe

Kompleksowa gwarancja zapewnia spokój i wsparcie posprzedażowe. Autoryzowany przedstawiciel producenta na terenie Polski z siedzibą we Wrocławiu.



Zgodność z normami

W pełni zgodny z ISO 80601-2-13, ISO 80601-2-55 i IEC 60601-1.

Tryby wentylacyjne

Dostępne osiem trybów wentylacji (VCV, PCV, PRVC, SPONT/PSV, SIMV-V, SIMV-P, SIMV-PRVC, ręczny) PEEP dostępny we wszystkich trybach oprócz ręcznego.



Absorber CO2

Wysokowydajny pochłaniacz z interfejsem respiratora w standardzie z przełączaniem trybu pracy respiratora, wyzwalanym przez przełącznik worek/ respirator. Wbudowany układ podgrzewania, a główne komponenty mogą być sterylizowane w autoklawie.



Parowniki środków wziewnych

Zdobywca nagród parownik Sigma Delta oraz nowy Sigma EVA. Parowniki do desfluranu dla różnych środków i z różnymi wlewkami dopasowane do wymogów wszystkich klinik.



Kardiomonitoring anestezyjologiczny

Alarmy dźwiękowe i wizualnie kodowane kolorami do podkreślenia znaczenia.



Aparat do znieczulenia ogólnego


Penlon Prima 460

- 15.4" kolorowy ekran dotykowy o rozdzielczości HD
- Elektryczny mikser gazów
- 7 trybów wentylacji
- Dedykowany dla dzieci oraz dorosłych
- Kompatybilny z systemem HIS



Aparat do znieczulenia ogólnego

Penlon Prima 460

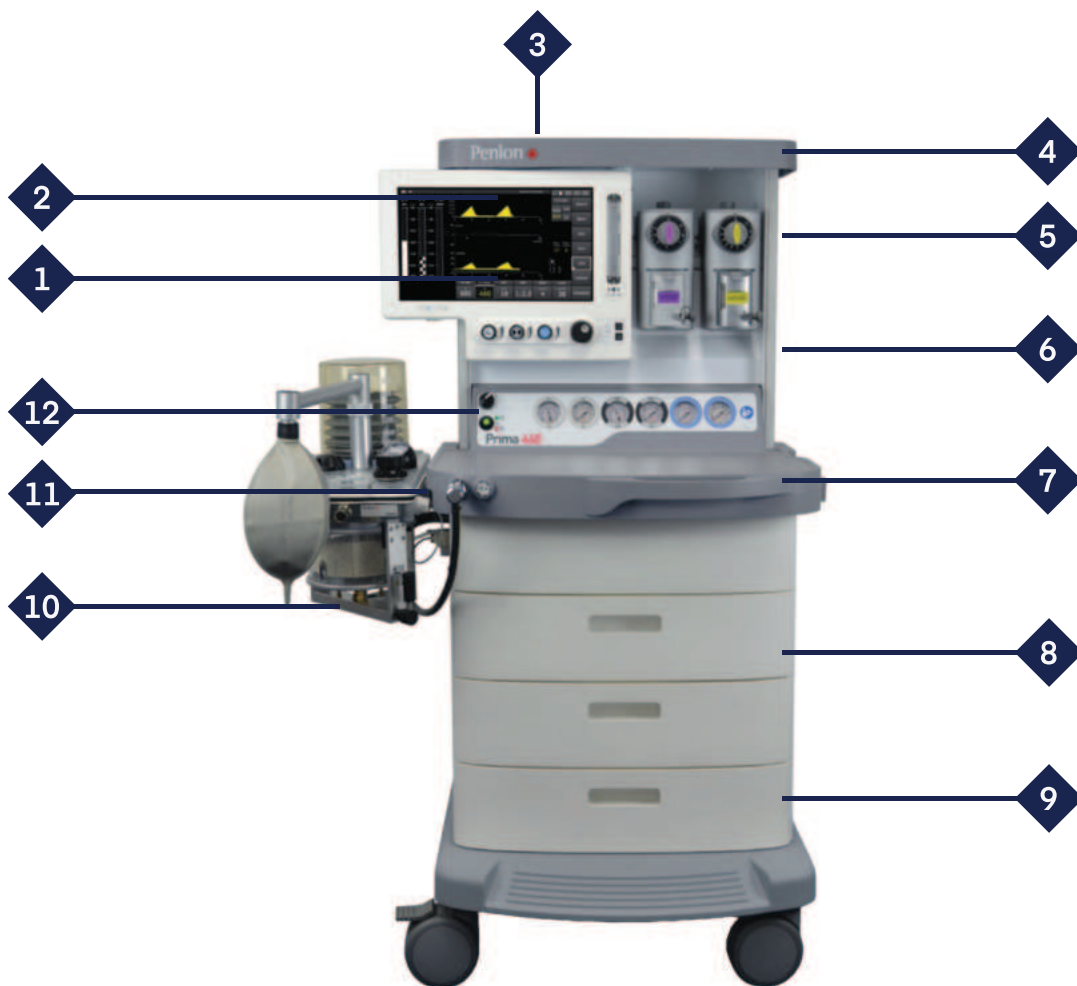

1 12.1" kolorowy ekran dotykowy HD z intuicyjnym interfejsem użytkownika

2 7 trybów wentylacji

3 Uniwersalna blat z bezpiecznym systemem mocowania GCX™ do monitorów pacjenta

4 Dodatkowe gniazda elektryczne

5 Miejsce na dwa parowniki

6 Możliwość montażu do trzech butli

7 Podświetlane miejsce pracy

8 Aluminiowe wsporniki kompatybilne z GCX™ zapewniają możliwość zamocowania akcesoriów

9 Szuflady o dużej pojemności


10 Zintegrowany pochłaniacz CO2 oraz grzałką układu pacjenta montowaną w standardzie

11 Opcjonalny podświetlany pomocniczy wspólny wylot gazu

12 Opcjonalny przepływomierz do tlenoterapii

Kontrola przepływu świeżych gazów

Przepływ świeżego gazu jest kontrolowany za pomocą sprawdzonego systemu sterowania oraz mechanicznego urządzenia zapobiegającego niedotlenieniu. Mieszanka gazów jest wyświetlana za pomocą oznaczonego kolorami wirtualnego wyświetlacza przepływu na ekranie dotykowym.

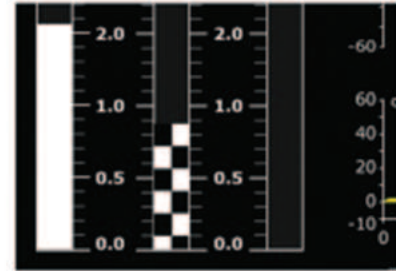

Sterowanie respiratorem

15.4" kolorowy ekran dotykowy HD z intuicyjnym interfejsem użytkownika



Większe bezpieczeństwo pacjenta

Precyzyjny mechaniczny system zapobiegający hipoksji oraz funkcja automatycznego przełączania gazu napędowego.



Przebiegi i wykresy oddechowe

Wyświetlanie parametrów ciśnienia w drogach oddechowych plus dwie krzywe wybierane przez użytkownika lub wyświetlanie pętli oddechowych.



Dwukierunkowe czujniki przepływu

Mierzona objętość wdechowa i wydechowa wyświetlane na ekranie.



Profile pacjentów

Odpowiedni dla pacjentów dorosłych, pediatrycznych i noworodkowych.



Monitorowanie gazów

Boczna szyna GCX umożliwia zamontowanie kardiomonitora z modulem pomiaru gazów



Alarmy

Alarmy dźwiękowe i wizualne z oznaczeniem kolorami do podświetl poziomu alarmów.



Zasilanie sieciowe

Trzy gniazda elektryczne 230V/50Hz znajdujące się na tylnej ścianie aparatu.



Zasilanie akumulatorowe

Zapewnienie akumulatorowego zasilania urządzenia do 1h w przypadku awarii zasilania sieciowego.



Opcje zasilania gazami

Do trzech przyłączy butli (AIR, O₂ i N₂O) oraz trzy przyłącza do instalacji centralnej (O₂, N₂O i Powietrze).



Dodatkowe wyjście gazów ACGO

Przełącznik wyjścia świeżych gazów do otwartych układów oddechowych.



Aktywny układ odciągu

Ewakuuje gazy poanestetyczne ochraniając personel przed ich szkodliwym wpływem.



Konserwacja i wsparcie posprzedażowe

Kompleksowa gwarancja zapewnia spokój i wsparcie posprzedażowe. Autoryzowany przedstawiciel producenta na terenie Polski z siedzibą we Wrocławiu.



Zgodność z normami

W pełni zgodny z ISO 80601-2-13, ISO 80601-2-55 i IEC 60601-1.

Tryby wentylacyjne

Dostępne osiem trybów wentylacji (VCV, PCV, PRVC, SPONT/PSV, SIMV-V, SIMV-P, SIMV-PRVC, ręczny) PEEP dostępny we wszystkich trybach oprócz ręcznego.



Absorber CO2

Wysokowydajny pochłaniacz z interfejsem respiratora w standardzie z przełączaniem trybu pracy respiratora, wyzwalanym przez przełącznik worek/ respirator. Wbudowany układ podgrzewania, a główne komponenty mogą być sterylizowane w autoklawie.



Parowniki środków wziewnych

Zdobywca nagród parownik Sigma Delta oraz nowy Sigma EVA. Parowniki do desfluranu dla różnych środków i z różnymi wlewkami dopasowane do wymogów wszystkich klinik.



Kardiomonitoring anestezyjologiczny

Alarmy dźwiękowe i wizualnie kodowane kolorami do podkreślenia znaczenia.



Aparat do znieczulenia ogólnego


Penlon Prima 320 Advance

- 10.4" kolorowy ekran dotykowy
- 8 trybów wentylacji (VCV, PCV, PRVC, SPONT/PSV, SIMV-V, SIMV-P, SIMV-PRVC, ręczny)
- Opcjonalne monitorowanie CO₂ i SpO₂
- Zintegrowany pochłaniacz CO₂



Aparat do znieczulenia ogólnego

Penlon Prima 320 Advance

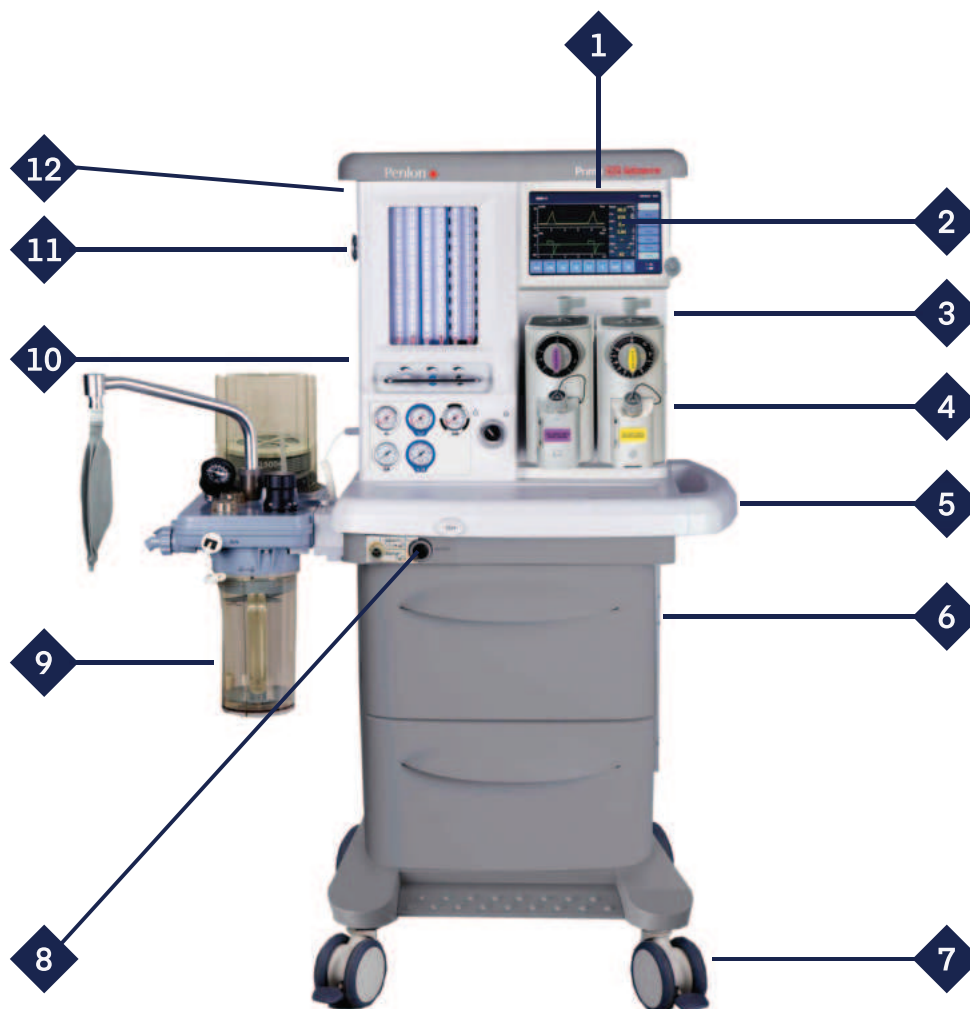

- | | | | |
|---|---------------------------------------|----|--|
| 1 | 10.4" kolorowy ekran dotykowy | 8 | Przełączane wyjście świeżych gazów z przodu aparatu do otwartych układów oddechowych |
| 2 | 8 trybów wentylacji | 9 | Zintegrowany pochłaniacz CO2 |
| 3 | Opcjonalne monitorowanie SpO2 i CO2 | 10 | Dodatkowe szyny montażowe kompatybilne z ramionami GCX |
| 4 | Miejsce na dwa parowniki (Selectatec) | 11 | Opcjonalne dodatkowe wyjście tlenu |
| 5 | Miejsce pracy oświetlone diodami LED | 12 | Trzy gniazda elektryczne |
| 6 | Szuflady o dużej pojemności | | |
| 7 | Opcjonalny hamulec centralny | | |

Kontrola przepływu świeżych gazów

Wszystkie mierzone parametry są pogrupowane na ekranie w łatwo dostępnym oknie wyświetlania.



Sterowanie respiratorem

10.4" TFT kolorowy ekran dotykowy.



Większe bezpieczeństwo pacjenta

Prezycyjny mechaniczny system zapobiegający hipoksji oraz funkcja automatycznego przełączania gazu napędowego.



Przebiegi i wykresy oddechowe

Możliwy wybór maksymalnie 10 wykresów oddechowych na wyświetlaczu.



Dwukierunkowe czujniki przepływu

Mierzona objętość wdechowa
i wydechowa wyświetlane na ekranie.



Profile pacjentów

Odpowiedni dla pacjentów dorosłych,
pediatrycznych i noworodkowych.



Monitorowanie gazów

Opcjonalne monitorowanie CO2 oraz SpO2.



Army

Alarmy dźwiękowe i świetlne o różnych priorytetach.



Zasilanie sieciowe

Trzy gniazda elektryczne 230V/50Hz
znajdujące się na tylnej ścianie aparatu.



Zasilanie akumulatorowe

Zasilanie akumulatorowe
Zapewnienie akumulatorowego zasilania urządzenia do 1,5h w przypadku awarii zasilania sieciowego.



Opcje zasilania gazami

Dwa przyłącza butli (O₂ i N₂O) oraz trzy przyłącza do instalacji centralnej (O₂, N₂O i Powietrze). Respirator napędzany tlenem lub powietrzem.



Dodatkowe wyjście gazów ACGO

Przełącznik wyjścia świeżych gazów
do otwartych układów oddechowych.



Aktywny układ odciągu

Evakuuje gazy poanestetyczne
ochraniając personel przed ich szkodliwym
wpływem.



Konserwacja i wsparcie posprzedażowe

Kompleksowa gwarancja zapewni spokój i wsparcie posprzedażowe. Autoryzowany przedstawiciel producenta na terenie Polski z siedzibą we Wrocławiu.



Zgodność z normami

W pełni zgodny z ISO 80601-2-13,
ISO 80601-2-55 i IEC 60601-1.

Tryby wentylacyjne

Dostępne osiem trybów wentylacji (VCV, PCV, PRVC, SPONT/PSV, SIMV-V, SIMV-P, SIMV-PRVC, ręczny) PEEP dostępny we wszystkich trybach oprócz ręcznego.



Absorber CO2

Wysokowydajny pochłaniacz z interfejsem respiratora w standardzie z przełączaniem trybu pracy respiratora, wyzwalanym przez przełącznik worek/ respirator. Wbudowany układ podgrzewania, a główne komponenty mogą być sterylizowane w autoklawie.



Parowniki środków wziewnych

Zdobywca nagród parownik Sigma Delta oraz nowy Sigma EVA. Parowniki do desfluranu dla różnych środków i z różnymi wlewkami dopasowane do wymogów wszystkich klinik.



Kardiomonitoring anestezjologiczny

Alarmy dźwiękowe i wizualnie kodowane kolorami do podkreślenia znaczenia.



Respiratory stacjonarne Origin Panther



Panther 5. Ultranowoczesny respirator. Prostota obsługi, niespotykana funkcjonalność. Bez kompromisów czy niedomówień.

To unikalny produkt. Opracowany przez twórców przełomowych rozwiązań w dziedzinie wentylacji płuc. Od dziś zmienny czy wysoki przeciek, mali pacjenci czy POChP nie będą problemem.

Panther 5. oferuje intuicyjny interfejs o 2 poziomach głębokości pozwalający na opiekę począwszy od terapii wysokoprzepływowej, nieinwazyjnej oraz inwazyjnej. Unikalny algorytm wyzwalania oddechów, który jako pierwszy pozwala na idealną synchronizację z pacjentem, funkcje rekrutacji, ocena możliwości ekstubacji oraz objętość przestrzeni martwej w estymacjach Bohra i Enghoffa to tylko początek profesjonalnej opieki.

Specjaliści z Origin Medical postawili na inteligentne rozwiązania wykorzystujące uczenie maszynowe. Dało to możliwość opracowania algorytmów kontroli, które pozwalają na wyjątkowy komfort pacjenta, automatyczną regulację parametrów wentylacji czy szybką reakcję na zmianę wzorca oddechowego pacjenta.



Urządzenie do kompresji klatki piersiowej CEPER



Automatyczne urządzenie do kompresji klatki piersiowej CEPER służące do ciągłego uciskania klatki piersiowej z zewnątrz w celu reanimacji osoby, która doznała nagłego zatrzymania krążenia, u której oddech lub krążenie krwi ustały.

Wskazania:

Urządzenie jest przeznaczone dla dorosłych pacjentów powyżej 18. roku życia, u których występują następujące schorzenia:

- Zatrzymanie akcji serca
- Brak oddechu i tętna
- Brak przytomności i brak reakcji
- Ostre zatrzymanie krążenia charakteryzujące się utratą przytomności

Automatyczne urządzenie do kompresji klatki piersiowej CEPER to urządzenie pierwszej pomocy, które zapewnia ciągłą i skuteczną kompresję klatki piersiowej (masaż) i pomaga zespołom ratowniczym. Zostało ono opracowane w celu wyeliminowania problemów występujących podczas masażu manualnych wykonywanych w celu reanimacji.



Rozwiązania do intubacji Laryngoskop video DIAMOND

Najważniejsze cechy:

- 3,5-calowy kolorowy ekran dotykowy TFT
- Kamera wysokiej rozdzielczości
- Wodoodporna konstrukcja (IP66)
- Technologia natychmiastowego odparowywania
- Akumulator litowy z możliwością ładowania
- Inteligentny system zarządzania energią

Wyświetlacz dotykowy

Duży, 3,5-calowy ekran dotykowy zapewnia wyraźny obraz z kamery wysokiej jakości oraz dostęp do ustawień urządzenia. Wyświetlacz można obracać o 270° w poziomie i 140° w pionie, co ułatwia intubację pod różnymi kątami.



Funkcje i możliwości

- 1. Wideo na ekranie zewnętrznym** - Możliwość przesyłania obrazu w czasie rzeczywistym na zewnętrzny monitor przez port HDMI.
- 2. Zapis zdjęć i wideo** - Wbudowany przycisk umożliwia zapis do 10 000 zdjęć lub 120 minut nagrania na wewnętrzną pamięć urządzenia.
- 3. Wodoodporna konstrukcja** - Obudowa o stopniu ochrony IP66 pozwala na łatwe i skuteczne czyszczenie oraz dezynfekcję.
- 4. Zasilanie** - Akumulator litowy zapewnia do 4 godzin pracy na jednym ładowaniu. Pozostały czas pracy wyświetlany jest na ekranie.

Łopatki laryngoskopowe

Jednorazowe łopatki typu Macintosh zwiększają bezpieczeństwo i kontrolę zakażeń. Dostępne są w różnych rozmiarach, w tym specjalna łopatka do trudnych intubacji. Wszystkie łopatki są kompatybilne z ergonomicznym uchwytem oraz technologią natychmiastowego odparowywania, eliminującą konieczność wcześniejszego podgrzewania.

Dodatkowe funkcje:

- Jasne, białe oświetlenie LED
- Standardowe złącze USB-C
- Opcjonalne moduły Wi-Fi i HDMI

CORITON



Model: RS001E-100-3
Dla aparatów EKG



Model: RS010-100-4
dla aparatów USG



Model: RS002-102
Dla kardiomonitorów



Model: RS002-100-XX
Dla respiratorów



Dla pomp infuzyjnych

CORITON



Model: TR900-XX
Wózek laparoskopowy



Model: TR800-300-1-2
Wózek anestezyjologiczny



Model: TR800-300-1-2
Wózek endoskopowy



Model: TR700-100-1
Stanowiska komputerowe

CORITON



Model: WM300-100



Model: WM500-100-13



Model: WM001E-100



Model: WM300-200



Model: WM500-200



Model: WM800-100-06

CORITON



Model: WM500-100



Model: WM800-100-06



Model: WM800-200-XX

AKCESORIA



Model: C.W.A.H.023-01



Model: C.W.A.009-1-1




Model: C.W.B.101-4



Model: C.W.B.030-10



Model: C.W.B.106
++C.W.A.001-64

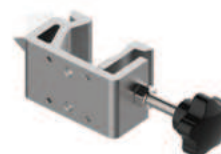

Model: CL001-00

Dlaczego warto nas wybrać?

Wieloletnie doświadczenie

Nasza firma posiada 50-letnie doświadczenie w branży sprzętu medycznego, w tym 16 lat w produkcji sufitowych kolumn. Tysiące zainstalowanych urządzeń w Polsce i na świecie to gwarancja najwyższej jakości usług.

Indywidualne podejście

Projektujemy panele i kolumny indywidualnie dla każdego pomieszczenia, uwzględniając jego możliwości oraz wyposażając je zgodnie z potrzebami klienta.

Najwyższa jakość

Świadomi, jak ważna jest niezawodność i trwałość w placówkach medycznych, korzystamy wyłącznie z najlepszych komponentów i akcesoriów.

Nowoczesne rozwiązania

Nasza oferta jest stale wzbogacana o najnowsze rozwiązania techniczne. Jeśli klient oczekuje czegoś spoza katalogu, chętnie spełniamy jego wymagania.

Zgodność ze standardami i bezpieczeństwo

Wszystkie oferowane przez nas urządzenia i sprzęt są zgodne z obowiązującymi normami europejskimi i polskimi, co zapewnia ich pełną adaptację do zastosowań medycznych oraz bezpieczeństwo.

Różnorodność dostępnych konfiguracji

Dostępne moduły można łączyć na wiele sposobów, wybierając różne opcje montażu. Nasi specjaliści są gotowi do pomocy w wyborze najlepszego rozwiązania.

Profesjonalny montaż i serwis

Zapewniamy wsparcie w doborze sprzętu dostosowanego do potrzeb klienta, a także jego montaż i serwis.

Aparatura Medyczna Sp. z o.o.

ul. Piękna 64C/2

50-506 Wrocław

NIP: 8992852755

REGON: 381657472

Tel.: 508944453

biuro@aparaturamedyczna.net

<https://aparaturamedyczna.net/>

KENDROMED

ul. Sołtysowicka 25b

51-168 Wrocław

Tel.: 608651970

kendromed@kendromed.pl

<https://kendromed.pl/>

